## ¿Cuál es su unidad Ancar favorita?



# ¡Encantados de conocerle!

Ancar es una empresa fundada en 1958 por el Sr. Antoni Carles Pujol. Nuestra historia comenzó en un pequeño taller de Vilassar de Mar, Barcelona. En la actualidad, somos una empresa con fábrica propia en la que cada día 70 empleados aportan lo mejor de sí mismos y producen los sillones dentales de la mayor calidad.

Conocidos por utilizar principalmente aluminio para nuestras unidades dentales, garantizamos que nuestros sillones le brindarán años de satisfacción en el trabajo. Gracias a la combinación de nuestra experiencia en al producción de productos de aluminio de calidad, la ergonomía y la tecnología, le aseguramos que su unidad le durará décadas. Los técnicos de nuestros distribuidores pueden garantizarle que nuestras unidades requieren un mantenimiento mínimo. Una buena unidad necesita pocas reparaciones o ninguna en absoluto.

Somos expertos en el diseño de unidades dentales ergonómicas, tecnológicas y resistentes, y nuestro objetivo es construir relaciones productivas y duraderas con nuestros clientes. Ofrecemos una amplia gama de productos de la más alta calidad con el apoyo de un equipo que se caracteriza por su trato cordial y su espíritu de servicio.

Atentamente, Antoni Carles Bosch Presidente





#### Ortodoncia con estilo

**Sd-60** 



La unidad Sd-60 es la forma más elemental a la vez que ingeniosa de equipar su consulta, especialmente indicado para prácticas de ortodoncia. Una inversión asequible que ofrece una unidad de ortodoncia con las mejores prestaciones, calidad de materiales, seguridad, precisión, funcionalidad, ergonomía e higiene.

#### ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA Sd-60

- Brazo de cánulas con dos mangueras de aspiración de serie.
- Pedal progresivo. Control del micromotor eléctrico mediante potenciómetro.
- Escupidera de porcelana extraíble y termodesinfectable.
- Grifo extraíble para una limpieza más cómoda.
- Brazo con compensación mecánica y freno neumático.
- Panel de control "Easy Touch" intuitivo y ergonómico.

- Turbina y jeringa de serie.
- Grupo hídrico de aluminio anticorrosivo y eje de rotación de 70°.
- Puerta con sistema de "apertura a presión" que ofrece un fácil acceso al interior.
- Ampliable con 2 instrumentos más.







#### ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA Ancar-3200

- · Sillón de ortodoncia electroneumático fabricado con una aleación de aluminio anticorrosivo ligero con posición Trendelenburg y 5 memorias de movimientos.
- · Brazo de instrumentos con movilidad ambidiestra, diseñada para usuarios diestros y zurdos.
- · 1 manguera de aspiración, jeringa 3 funciones, manguera para turbina y un micromotor o un limpiador.
- · Cabezal articulado multifuncional (incluido) o reposacabezas con movimiento esférico con freno de mano o neumático (opcional).
- · Altura mínima del sillón a 400 mm, altura máxima del sillón a 810 mm.



## Cómodo para usted, cómodo para sus pacientes



#### SILLÓN DE CONSULTA

Las prestaciones del Ancar 3000 no han sido diseñadas pensando solo en el profesional. Pensando en los pacientes, hemos querido ofrecerles la máxima comodidad durante todo el tratamiento.

Todas las unidades de la Serie Ortho son muy cómodos, tanto para el profesional como para el paciente. Su reposacabezas se adapta a cualquier estatura, también a la de los niños, lo que permite trabajar de forma óptima y confortable. Además, todas las posiciones son regulables desde el pedal. Se puede añadir el apoyabrazos derecho como opción. Están equipados con dispositivos de seguridad en la base y el respaldo para evitar movimientos imprevistos y garantizar así la máxima fiabilidad en todas sus intervenciones.







## Unidad electrónica con sistema colibrí



#### ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA Sd-300

- Equipo electrónico configurado a medida según los deseos del odontólogo, lo que ayuda a reducir los tiempos de intervención gracias a la pantalla táctil Touch Expert.
- Movimiento de 70º del grupo hídrico para facilitar el trabajo a 4 manos.
- · Pedal multifuncional.
- Brazo de cánulas con altura ajustable.
- Caja de conexiones integrada en la base del sillón.

## Unidad electrónica con mangueras colgantes





#### ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA Sd-350 Touch Expert

- Tecnología Touch Expert.
- Equipo electrónico configurado a medida según los deseos del odontólogo, lo que ayuda a reducir los tiempos de intervención gracias a la pantalla táctil Touch Expert.
- Movimiento de 70º del grupo hídrico para facilitar el trabajo a 4 manos.
- · Pedal multifuncional.
- Brazo de cánulas con altura ajustable.
- Caja de conexiones integrada en la base del sillón.



### Descubra la nueva S Line

Unidades dentales que combinan la funcionalidad con la estética para elevar su clínica al siguiente nivel





### Touch expert PRO™

#### Una tableta que le guiará en cada tratamiento. Una interfaz tan fácil de usar como su propio smartphone.

La nueva TOUCH EXPERT PRO es una tableta basada en ANDROID que le facilitará su trabajo diario. Resulta imposible nombrar en una sola página todas las características de esta tableta, pero estas son algunas de sus ventajas:

Pantalla multitáctil en color de 7 pulgadas inclinable y fácil de usar con tecnología IPS.

Número ilimitado de perfiles de usuario con su propia configuración.

Nombre de clínica, fecha y hora, y capacidad para añadir el logotipo de la clínica a cada pantalla.


Cargue radiografías y fotos, y vea imágenes, vídeos y manuales de la unidad.

Programación de los parámetros de trabajo del ultrasonido en ENDO, PERIO, SCALER, rango de trabajo e intensidad de luz de los instrumentos. Ajuste de los parámetros de trabajo del micromotor (con funciones ENDO): control de torque en Ncm, rotación directa o inversa, modo irrigación (spray/agua/aire), tipo de contra ángulo y dos tipos de velocidades: de 200 a 40.000 rpm y de 100 a 4000 rpm.

Descubra cómo la Touch Expert Pro le facilita el trabajo diario y solicite una demostración a su distribuidor Ancar más cercano. Encuentre su distribuidor en www.ancar-s.com.




### Sillón estándar y sistema colibrí

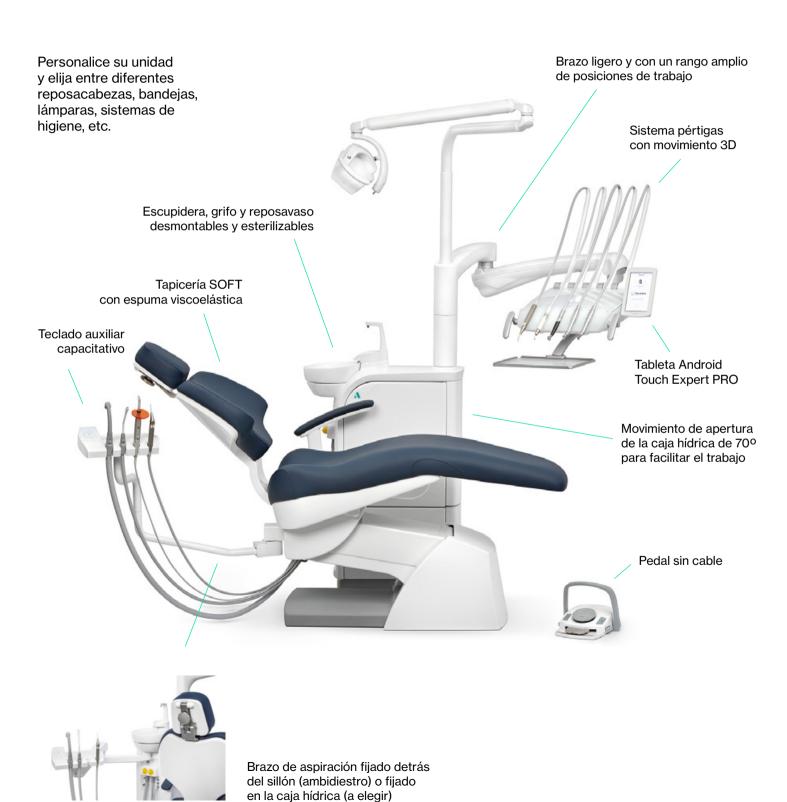





# Sillón reclinable con reposapiés abatible a 90° y sistema colibrí

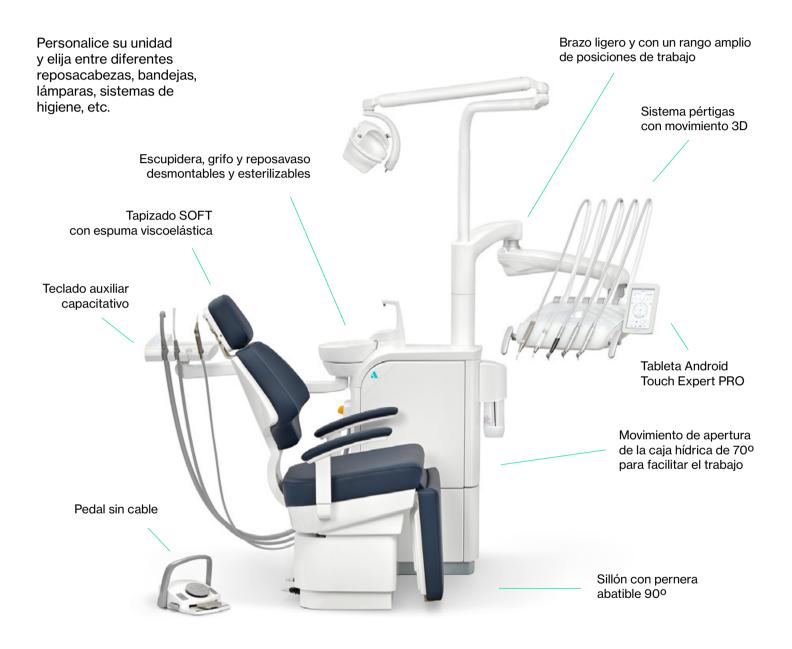



### Sillón estándar y mangueras colgantes

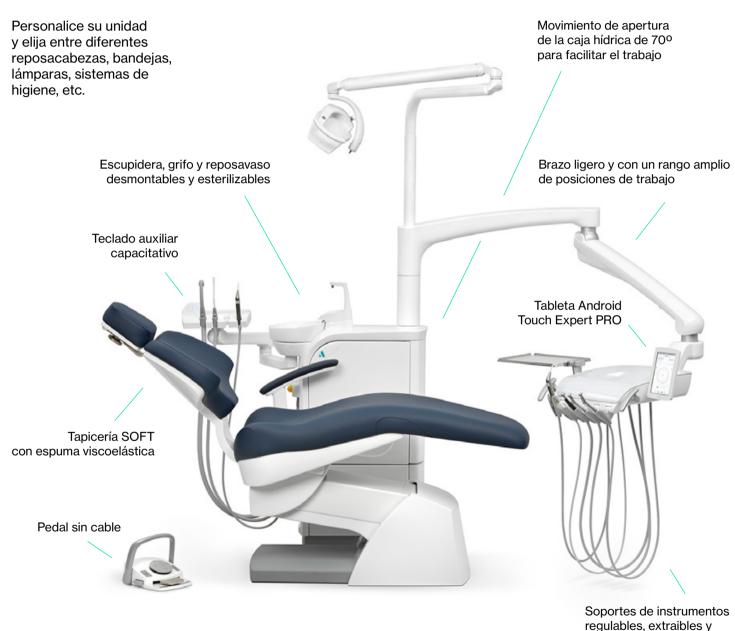

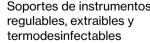




Brazo de aspiración fijado detrás del sillón (ambidiestro) o fijado en la caja hídrica (a elegir)



# Sillón reclinable con reposapiés abatible a 90° y mangueras colgantes

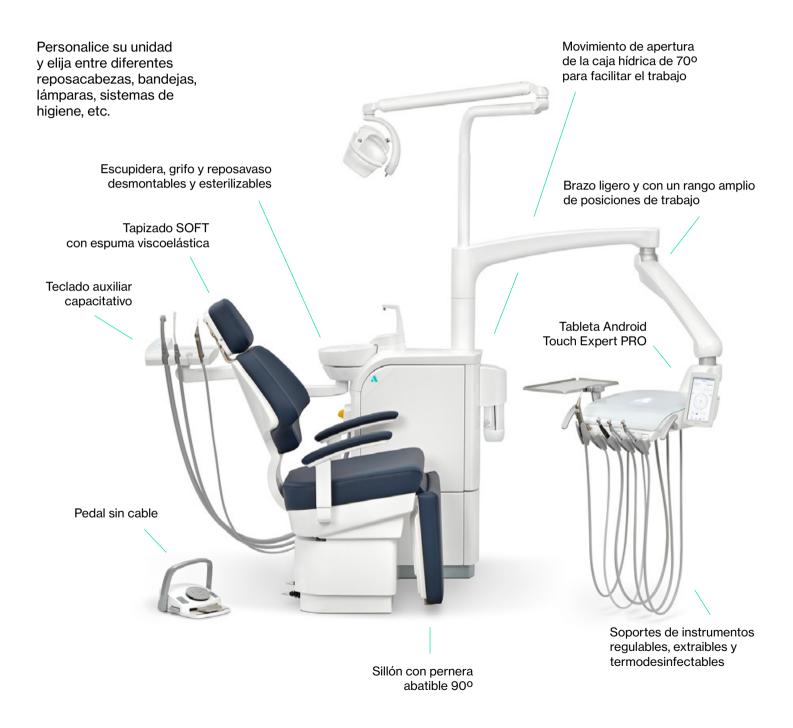


## **S**<sup>30</sup>

# Sillón estándar y carro dental






# Sillón reclinable con reposapiés abatible a 90° y carro dental

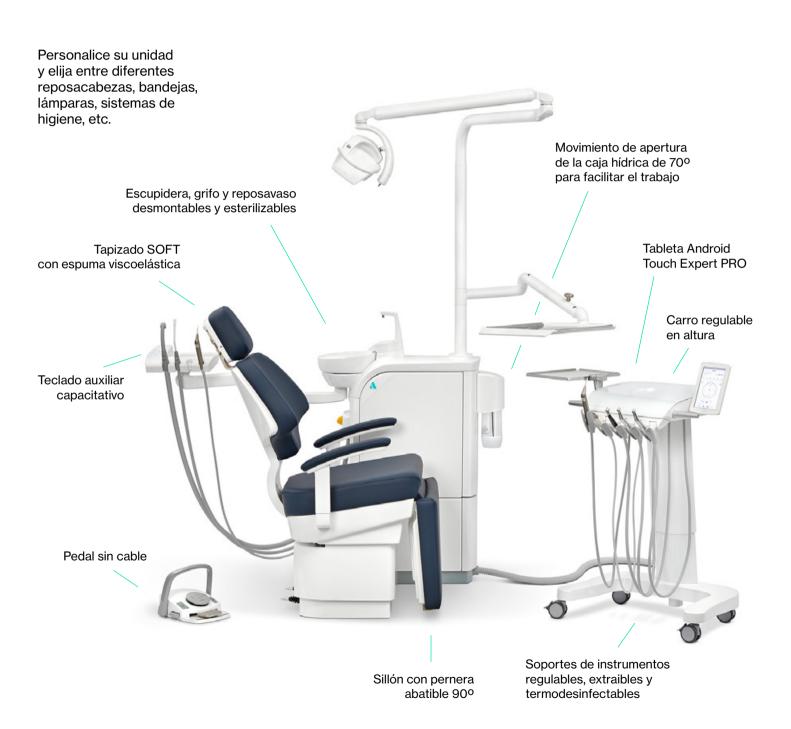



## Sillón estándar suspendido y sistema colibrí

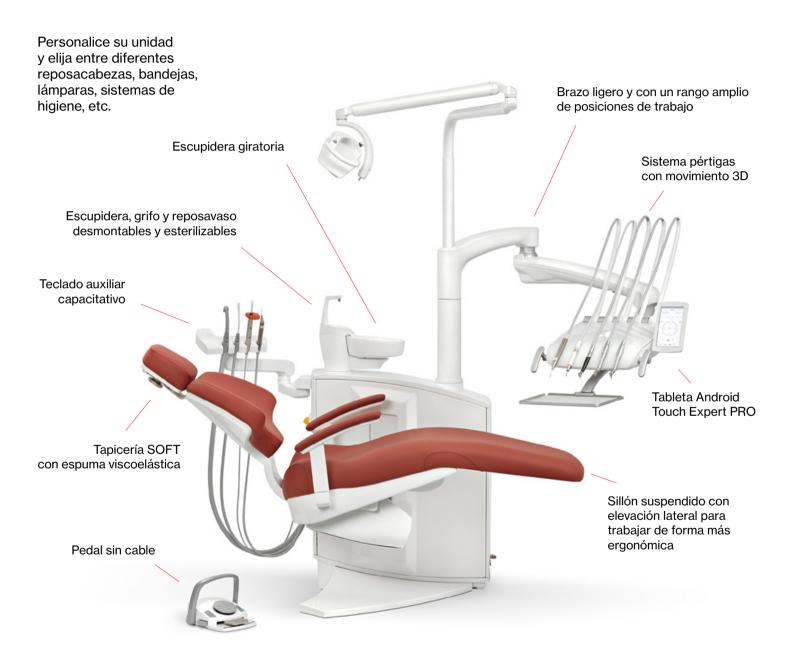



# Sillón estándar suspendido con reposapiés abatible a 90° y sistema colibrí


(sillón fijado en el grupo hídrico)

Personalice su unidad y elija entre diferentes reposacabezas, bandejas, lámparas, sistemas de Brazo ligero y con un rango amplio higiene, etc. de posiciones de trabajo Escupidera giratoria Sistema pértigas con movimiento 3D Escupidera, grifo y reposavaso desmontables y esterilizables Tapizado SOFT con espuma viscoelástica Tableta Android Teclado auxiliar **Touch Expert PRO** capacitativo Sillón suspendido con elevación lateral para Pedal sin cable trabajar de forma más ergonómica

Sillón con pernera abatible 90°




## Sillón estándar suspendido y mangueras colgantes

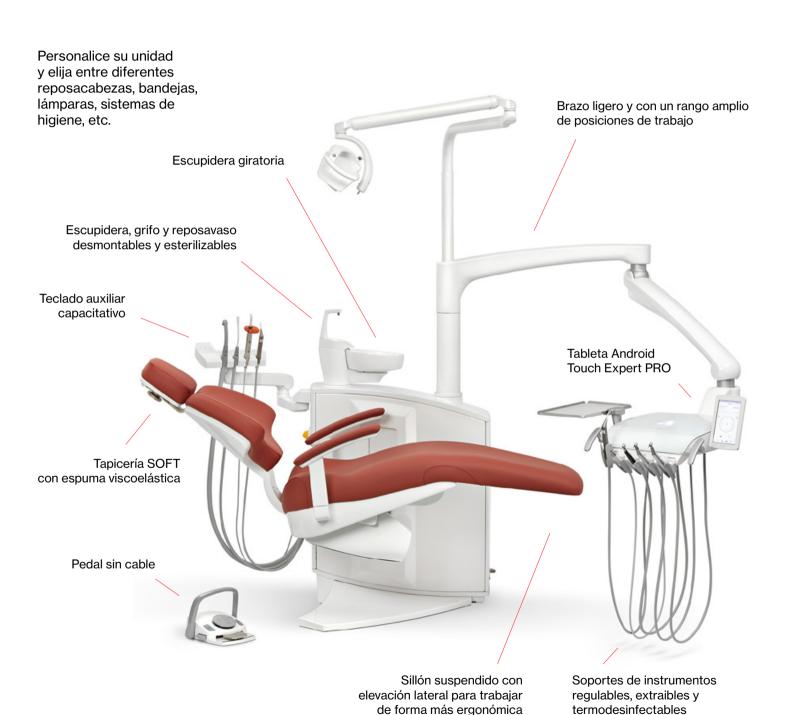




# Sillón estándar suspendido con reposapiés abatible a 90° y mangueras colgantes

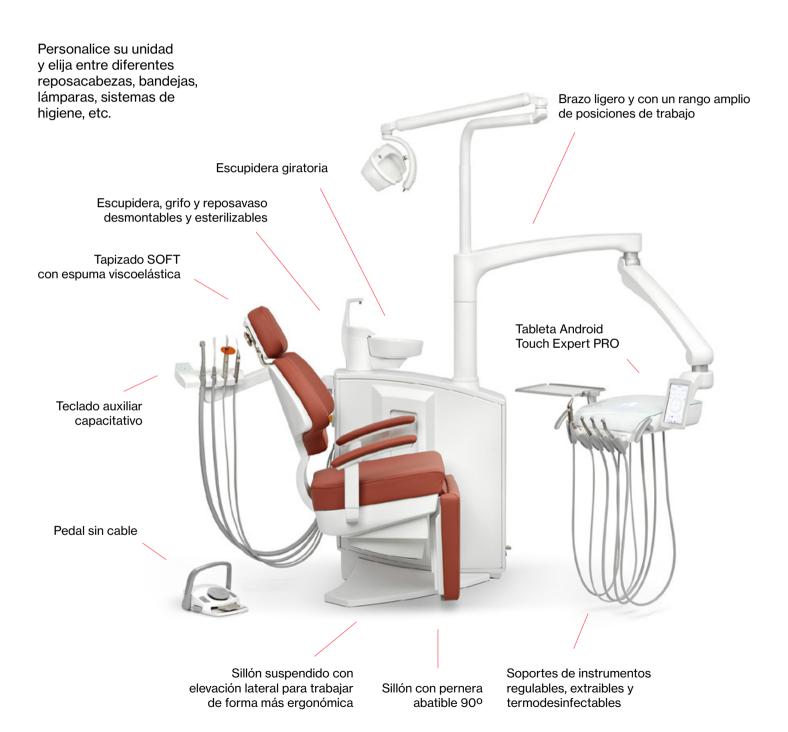



## Sillón estándar suspendido y carro dental

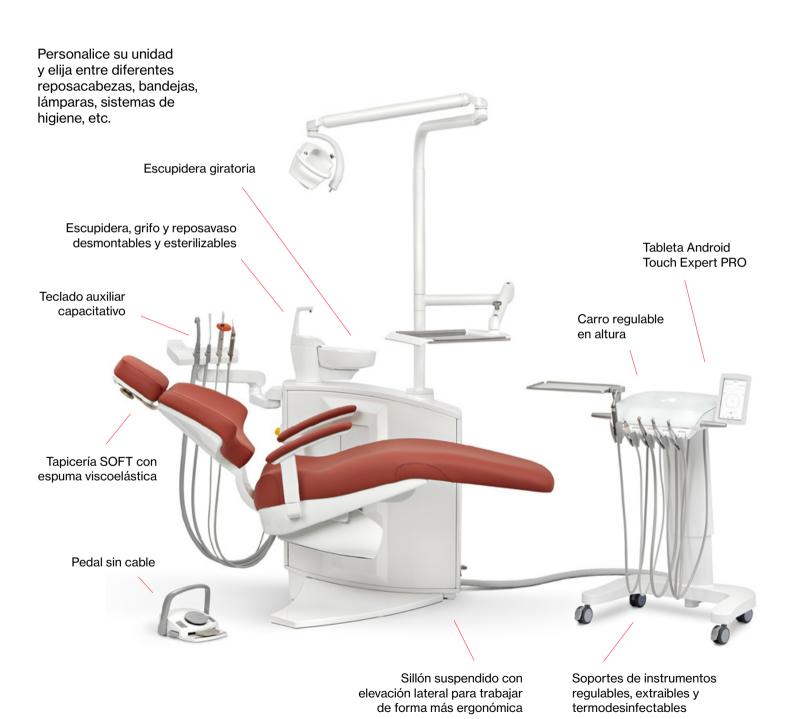



# Sillón estándar suspendido con reposapiés abatible a 90° y carro dental

(sillón fijado en el grupo hídrico)

Personalice su unidad y elija entre diferentes reposacabezas, bandejas, lámparas, sistemas de higiene, etc. Escupidera giratoria Escupidera, grifo y reposavaso Tableta Android desmontables y esterilizables Touch Expert PRO Tapizado SOFT con espuma viscoelástica Carro regulable en altura Teclado auxiliar capacitativo Pedal sin cable Sillón suspendido con Soportes de instrumentos elevación lateral para trabajar Sillón con pernera regulables, extraibles y

abatible 90°

de forma más ergonómica

termodesinfectables

### Colores y tipos de tapicería


#### La gama SOFT EASE ofrece los siguientes colores:



#### La gama SOFT ELEGANCE LUX ofrece los siguientes colores:



#### Gama de colores de tapicería "Standard":

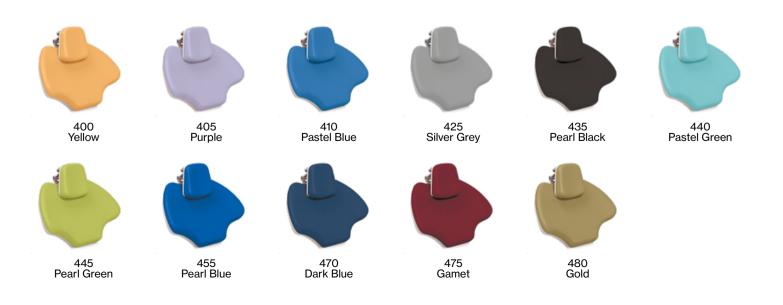

### Lámparas LED







La nueva generación de lámparas con tecnología LED de altas prestaciones ofrece numerosas ventajas.

Las luces LED generan una luz de calidad natural que garantiza una visión más nítida respecto a la luz halógena, ya que ofrecen un campo visual más amplio, menos sombras durante el proceso del tratamiento y una luz fría más blanca.

Las luces LED tienen una vida útil más prolongada que las bombillas halógenas, generan una cantidad de calor mínima y consumen menos.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	FARO EVA	FARO MAIA	G.COMM POLARIS
FUENTE DE LUZ	2 LED	2 LED	10 LED
TEMPERATURA DE COLOR (°K)	de 2.700 K a 5.700 K	5.000 K	de 4.200 K a 5.800 K
INTENSIDAD LUMÍNICA (LUX)	de 11.000 a 50.000 lux	de 3.000 a 35.000 lux	de 8.000 a 35,000 lux
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI	) > 95	85	> 85
ÁREA ILUMINADA (MM)	190 x 100	170 x 85	140 x 70
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 VAC 50/60 Hz	17-24 VAC 50/60 Hz	12-24 VAC 50/60 Hz
CONSUMO 24	V CA 26 VA / 32 V CC 14 VA	9 VA	29 VA
GARANTÍA	24 meses	12 meses	24 meses
CERTIFICADO CONFORME A LA DIRECTIVA	93/42 CE clase I	93/42 CE clase I	93/42 CE clase I

### Sistemas de imagen









Monitor LCD de 22", 24 V CC, alta resolución (1280 x 1024). Pantalla duradera, versátil y de alto rendimiento con una amplia gama de opciones de vídeo integradas, diseñada expresamente para entornos odontológicos. Cristal óptico antirreflejos, carcasa metálica.



Brazo "Faro" para el monitor LCD con doble eje de rotación e inclinación vertical.

### **Micromotores**

#### Elige entre:









#### Disponible para:







Disponible para:





# Localizador de ápice integrado en la unidad dental



#### Presentamos la última incorporación a nuestras unidades dentales S Line: el localizador de ápice integrado de Morita.

- La tecnología de vanguardia de Morita puede manejar incluso los casos de endodoncia más complicados.
- Di adiós a la molestia de tener máquinas o equipos adicionales en la clínica, o de tener que revisar las baterías y tener cables tirados por ahí.
- El localizador de ápice integrado en el sillón dental ahorra espacio y hace que su trabajo sea más eficiente y todo lo que necesita está en un solo lugar.

Además, el localizador de apice viene con uno de los siguientes packs:

• Pack 1: Localizador + 1 contrangulo + 1 turbina con acople

Pack 2:
Localizador + 1 contrangulo + 2 turbina con acoples

Pack 3:
Localizador + 2 contrangulos + 1 turbina con acople

# Sistemas de desinfección y de recuperación de amalgama

#### Desinfección mangueras de instrumentos



#### WEK

- Descontaminación de agua para las mangueras de instrumentos.
- Ciclos combinados y automáticos de descontaminación de los circuitos hídricos en instrumentos rotatorios.
- Efecto descontaminante no tóxico, continuo y efectivo.
- Supervisión automática de la dosificación esterilizada.
- · Funcionamiento sin mantenimiento.

#### Nuevo sistema de autoservicio de agua



#### KIT BOTELLA «SELF-WATER SYSTEM»

- Sistema independiente de suministro de agua a los instrumentos del equipo.
- El circuito de agua del equipo ha sido diseñado para que el agua no retorne al haber una pérdida de presión. Así se evita que se mezclen aguas de usos distintos, con lo que se elimina la contaminación cruzada con el agua de la red pública y viceversa.

#### Desinfección mangueras de aspiración



#### **H1**

- Sistema H1 de limpieza continua y desinfección completa del sistema de aspiración.
- Sin necesidad de desinfección manual adicional.
- El H1 incluye el sistema de selección automática de manguera de aspiración.

#### Recuperación de amalgama





TYPE-1

CAS-1

 Sistemas de recuperación de amalgama y de separación de aire y agua integrados con válvula de selección: aspiración seca o húmeda.

#### Su distribuidor Ancar más cercano:

#### **ANDALUCÍA**

SUMINISTROS DENTALES ABC www.abcdentalsl.es

#### **ARAGÓN**

**DENART** 

www.denart.es

SUMINISTROS DENTALES ANTON www.antonsl.es

#### **ASTURIAS**

**DENTAL SANA** 

www.dentalsana.com

#### **BALEARES**

**BALEARDENT** 

www.balear-dent.com

#### **CANTABRIA**

SUMINISTROS DENTALES ANTON www.antonsl.es

#### **CASTILLA Y LÉON**

DENTAL BALDEON T 987 87 62 00

DEPOSITO PRODENTAL S.L www.depositoprodental.com

#### **CATALUÑA**

AD+ MEDICAL

www.admasmedical.es

#### **COMUNIDAD VALENCIANA**

**RST** 

T 963 22 73 42

**AD+ MEDICAL** 

www.admasmedical.es

#### DYM PRODUCTOS DENTALES

www.dymclinicas.com

#### **GALICIA**

DENTAL SANA

www.dentalsana.com

#### **ISLAS CANARIAS**

**MALIDENTE** 

www.malidente.com

#### **MADRID**

AD+ MEDICAL

www.admasmedical.es

ASP DENT

www.aspdent.es

#### **MURCIA**

AD+ MEDICAL

www.admasmedical.es

#### **NAVARRA**

SUMINISTROS DENTALES ANTON

www.antonsl.es

#### **PAÍS VASCO**

SUMINISTROS DENTALES ANTON

www.antonsl.es

#### **LA RIOJA**

SUMINISTROS DENTALES ANTON

www.antonsl.es









### Technologies Beyond the Ordinary





ancar@ancar-online.com

(+34) 937 540 797

C/Volta dels Garrofers, 41-42 Pol. Ind. Els Garrofers 08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

ancar-online.com · ancar-s.com